## Daisy - Kompressionsbody

## ART.NO 51204

Kompressionsbody aus nahtlos gestricktem Material mit doppeltem Material am Bauch. Empfohlen nach der Operation am Bauch wie Fettabsaugung oder Bauchdeckenstraffung. Der Body kann vollständig geöffnet und sofort nach der Operation einfach angelegt werden. Beidseitige Verschlusshaken für einfaches Ausund Anziehen sowie Justieren der Passform. Der Schrittbereich kann durch Verschlusshaken geöffnet werden und ermöglicht somit Toilettenbesuche ohne dabei das Kleidungsstück auszuziehen zu müssen. Bund mit Silikonkante, was ein Rutschen verhindert und den Tragekomfort erhöht. Das doppelte Material über dem Bauch bildet eine Tasche, in die bei Bedarf Pelotten / Schaumstoffmaterialien eingefügt werden können, um zusätzlichen Druck zu erzeugen. Gestricktes, flexibles Material in 4-Wege-Stretch, das sich dem Körper anpasst. Entlastet und komprimiert, ohne einzuschneiden oder unbequem zu werden. Figurbetonte Zonen an Gesäß und Rücken.

Anwendungsgebiete: Kompressionskleidung nach plastischer Chirurgie. Entsprechende Kompressionsklasse 1. Kontraindikationen: Infektion. Arterielle Durchblutungsstörungen. Hohes Thromboserisiko.

Material: 87% Polyamid, 13% Elasthan. Latexfrei.

Waschanleitung: Maschinenwäsche 40°C, kann bei Bedarf bei höheren Temperaturen gewaschen werden, max. 60°C. Die Lebensdauer des Produkts ist jedoch länger bei einer niedrigeren Waschtemperatur. Die Verwendung eines Waschsäckchens wird empfohlen. Verwenden Sie keine Bleichmittel, Chlor oder Weichspüler. Nicht Trockner geeignet.

Maße: Für eine bestmögliche Passform und den richtigen Kompressionsgrad ist es wichtig, dass das Kleidungsstück sorgfältig, gemäß den Angaben der Maßtabelle, angepasst wird. Das Kleidungsstück muss eng anliegen, darf sich aber nicht unangenehm oder einengend anfühlen.

Taille: Messen Sie den Umfang an der schmalsten Stelle der Taille.

Hüfte: Stellen Sie sich mit geschlossenen Beinen auf eine gerade Unterlage und messen Sie den Umfang ihrer Hüfte über dem Schambein, an der breitesten Stelle Ihres Gesäßes/Hüfte.

Größe	Taillenumfang cm	Hüftmaße cm	Art.no Schwarz	Art.no Beige
XS	62-68	86-91	51204-00-30	51204-08-30
S	69-75	92-97	51204-00-40	51204-08-40
M	76-83	98-103	51204-00-50	51204-08-50
L	84-92	104-111	51204-00-60	51204-08-60
XL	93-101	112-119	51204-00-70	51204-08-70
2XL	102-110	120-127	51204-00-80	51204-08-80










Verschlusshaken an beiden Seiten und im Schritt sowie Silikon im Bund.

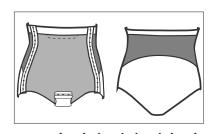





Seamless







Compression class I

Fully openable & Adjustable





